

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU ROLATORI

Dragi korisniče,

Hvala vam što koristite naše proizvode. Molimo pročitajte ovo uputstvo da biste dobro upoznali naše proizvode pre upotrebe.

Rolator je dizajniran da pruži podršku i pomoć onima koji ne mogu ili nemaju samopouzdanja da hodaju bez nekog nivoa podrške. Ovaj rolator je namenjen za upotrebu kako u zatvorenom prostoru, tako i napolju .

Otvorite ram. Stavite korpu ispod sedišta, obuhvatite ram naslona. Stavite naslon za ruke u ram i zategnite šrafove.

Bezbednost i održavanje:

1. Proverite da li su svi šrafovi zategnuti
2. Težina korisnika ne bi trebalo da prelazi 114 kg
3. Održavajte čistoću i stavite malo ulja za podmazivanje svakih 6 meseci

Br.	Naziv	SPEC.	Kom.
1.	Ram		1
2.	Naslon za leđa		1
3.	Sedište		1
4.	Šraf	M6x30	2
5.	Navrtanj	M6	2
6.	Zaptivka		2
7.	Naslon za ruke		2
8.	Korpa		1

### Šetnja

Rolator treba da se koristi kao pomoć pri kretanju stvarajući prirodnu ravnotežu. Sa rukama čvrsto uhvaćenim za ručke, polako hodajte iza rolatora. Lagano gurajte napred koristeći ravnomerno raspoređenu težinu između upravljača.

### Kočenje

**Normalna kočnica** se može aktivirati povlačenjem ručice kočnice prema gore, slično upravljanju kočnicama na biciklu. Ova funkcija se može primeniti dok hodate sa rolatorom da usporite brzinu, da se zaustavite na trenutak ili da manevrišete gore, dole ili zaobilazite prepreke koje vam mogu biti na putu.

**Parkirna kočnica** se može aktivirati guranjem ručke nadole u položaj za zaključavanje. Ova funkcija treba da se aktivira kada korisnik prekine sa korišćenjem rolatora na određeno vreme. Iz bezbednosnih razloga, parkirnu kočnicu uvek treba aktivirati pre nego što sednete na sedišta. Na primer, dok kupujete, korisno je aktivirati parkirnu kočnicu dok ste zaustavljeni u prolazu kako biste izbegli da rolator nastavi da se kreće. Da biste otpustili parkirnu kočnicu, lagano povucite prema gore. Kočioni sistem je pogodan i lak za rukovanje. Ljudima koji imaju invaliditet ruku ručice kočnica treba da budu široke, udobne i neobavezujuće. Biće potrebno primeniti minimalni pritisak da bi se aktivirao kočioni sistem.

Korpe treba ukloniti pre sklapanja bilo kog rolatora. Sa korisničke strane jedinice uhvatite traku za sklapanje koja se nalazi ispod sedišta na šarkama i podignite je u preklopljeni položaj. Rolator će se lako sklopiti za skladištenje ili transport.

## UPOZORENJE! PROČITAJTE PRE KORIŠĆENJA

Rolatoru nije namena da se koristi kao invalidska kolica. Za maksimalnu bezbednost, uverite se da su vam sve bezbednosne funkcije objašnjene od strane kvalifikovanog lica, lekara ili ovlašćenog prodavca. Često proveravajte sve plastične delove na istrošenost. Rolatori nisu dizajnirani da pomognu korisnicima prelazak iz sedećeg u stojeći položaj. Prilikom zaustavljanja nemojte se previše naslanjati na rolator. Kočnice nisu dizajnirane da izdrže preveliki pritisak. Rolatori se ne preporučuju za osobe sa ozbiljno ograničenim kretanjem, kojima se može preporučiti kruta hodalica. Konsultujte se sa svojim lekarom pre upotrebe ovog proizvoda, posebno ako uzimate bilo koji lek. Nepoštovanje ovog upozorenja može dovesti do povrede.

## ČIŠĆENJE

- Čistite i dezinfikujte rolator u redovnim intervalima. Da biste to uradili, koristite blagu sapunastu vodu bez aditiva za ribanje.
- Rolator možete dezinfikovati korišćenjem komercijalno dostupnih proizvoda.
- Nikada ne koristite parne odmašćivače. Nikada ne koristite sredstva za ribanje ili kaustična sredstva za čišćenje.


*Ne izlažite proizvod ekstremnim temperaturama (preko 40°C ili ispod 0°C)*

### Informacije o proizvođaču i evropskom predstavniku:



**FOSHAN SHUNKANGDA MEDICAL TECH CO., LTD**

Pingnan industrial Zone, Guicheng Street, Nanhai District, Foshan, Guangdong, China

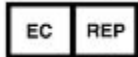

**SUNGO Europe B.V.**

Olympisch Stadion 24, 1076DE, Amsterdam, Netherlands

### PRIGOVOR - REKLAMACIJA

Potrošač ima pravo prigovora - reklamacije na kupljeni proizvod za koji se ne izdaje garantni list, u roku od 6 meseci od datuma kupovine.

Uz prigovor se **OBAVEZNO** podnosi račun o kupljenom proizvodu.

Prigovor se podnosi u prodajnom objektu u kome je proizvod kupljen tj. licu ovlašćenom za prijem prigovora koje je prisutno na prodajnom mestu tokom radnog vremena.

Ovlašćeno lice odlučuje o prigovoru istog dana kada je prigovor podnet, a najkasnije u roku od osam dana od dana podnošenja prigovora.

Ako je prigovor osnovan zbog nedostatka na proizvodu, potrošač ima pravo na:

1. zamenu kupljenog proizvoda za nov proizvod, odnosno proizvod odgovarajuće marke (modela, tipa)
2. da mu se vrati iznos plaćen za taj proizvod u visini maloprodajne cene tog proizvoda na dan kupovine
3. otklanjanje nedostatka na proizvodu.

Potrošač ima pravo na zamenu kupljenog proizvoda ili povraćaj plaćenog iznosa samo ukoliko proizvod nije korišćen, nije oštećen ni na koji način i u originalnom je pakovanju. Prodavac će detaljno pregledati proizvod i utvrditi ispunjenost svih uslova za prihvatanje prigovora.

Prigovor je neosnovan ako je nedostatak na proizvodu nastao:

1. zbog nepravilnog korišćenja, rukovanja, održavanja ili stavljanja proizvoda u funkciju
2. zbog oštećenja proizvoda koji je posledica nemarnog odnosa prema proizvodu, pokušaja popravki ili prepravki proizvoda, nasilnog otvaranja
3. u uslovima koje Ortopedija – Novi život nije mogla ni na koji način da predvidi, spreči ili da na njih preventivno utiče (viša sila).

Ako potrošač pretrpi štetu prouzrokovanu proizvodom sa nedostatkom, može da zahteva naknadu štete. Prava na naknadu štete potrošač može da ostvari pod uslovom da nedostatak nije nastao njegovom krivicom

Ovlašćeni predstavnik proizvođača, uvoznik i distributer:

Ortopedija – Novi život doo, Ustanička 234A, Beograd

Tel. Maloprodaja: 011/7621-952

Veleprodaja i servis: 011/7621-953

Email: [info@ortopedija.co.rs](mailto:info@ortopedija.co.rs)

[www.ortopedija-novizivot.co.rs](http://www.ortopedija-novizivot.co.rs)

Broj rešenja 515-02-01373-23-003 od 29.05.2023.