


## UPUTSTVO ZA UPOTREBU STOLICE ZA KUPANJE

Dragi korisniče,

Hvala vam što koristite naše proizvode. Molimo pročitajte ovo uputstvo da biste dobro upoznali naše proizvode pre upotrebe.

1. Proverite da li stolica za kupanje stoji čvrsto na mestu, ne dozvoljavajući joj da se ljulja ili klizi. Kada znate kako da bezbedno koristite stolicu za kupanje, potencijalne povrede se mogu svesti na minimum. Ako se ne osećate bezbedno dok se tuširate i kupate, nabavite stolicu za kupanje i prateći ove jednostavne korake mogu vam pomoći da se ponovo osećate prijatno.
2. Sakupite sve što će vam trebati da biste mogli da ga dosegnete bez ustajanja dok se tuširate. Podesite visinu stolice tako da možete lako da sedite i ustanete, posebno ako patite od čestih bolova u leđima.
3. Postavite zaštitne prostirke i peškire, nikada ne gazite na gole površine mokrim nogama, to može brzo dovesti do klizanja. Uverite se da su noge ravne i u kontaktu sa podom. Koristite prostirku otpornu na klizanje i ispod stolice i ispod nogu.
4. Pratite pokrete, najveći deo učenja kako se bezbedno tuširati sa stolicom za kupanje je bez pravljenja previše iznenadnih pokreta. Očistite područje od bilo kakve prepreke kako se ne biste spotaknuli na nešto ili ne bi pali.
5. Ako radite sa povređenim ili osobom sa invaliditetom, vodite ih kroz proces i ostavite im dovoljno prostora za privatnost. Pazite na raspodelu težine. Izbegavajte da sedite na ivici stolice ako ne morate.
6. Nemojte prekoračiti ograničenje maksimalne težine korisnika. Proveravajte u redovnim intervalima da li ima istrošenosti i oštećenja, posebno guma na nogarima. Ne koristite stolicu ako su gume na nogarima oštećene. Nemojte stajati na stolici za kupanje.
7. Rok trajanja nije primenljiv za ova medicinska pomagala. Maksimalna težina korisnika: 100 kg.
8. Sedište za kupanje je napravljeno od plastike, neklizajućeg aluminijumskog rama i gume.
9. Redovno čistite; obrišite blagim rastvorom deterdženta/dezinfekcionog sredstva.

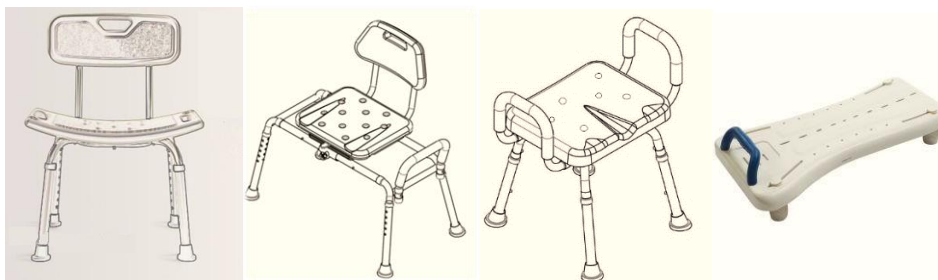


Informacije o proizvođaču i evropskom predstavniku:



FOSHAN SHUNKANGDA MEDICAL TECH CO., LTD

Pingnan industrial Zone, Guicheng Street, Nanhai District, Foshan, Guangdong, China

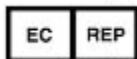

SUNGO Europe B.V.

Olympisch Stadion 24, 1076DE, Amsterdam, Netherlands

## NAPOMENA!

**OVO JE PROIZVOD KOJI PRIPADA GRUPI MEDICINSKIH SREDSTAVA KOJA DOLAZE U DIREKTAN DODIR SA KOŽOM I INTIMNIM DELOVIMA TELA.**

**IZ HIGIJENSKIH RAZLOGA I RADI ZAŠTITE NAŠIH KUPACA, OVO POMAGALO SE NAKON KUPOVINE NE MOŽE VRATITI NITI MENJATI.**

**REKLAMACIJE NA OVO POMAGALO SE PRIHVATAJU ISKLJUČIVO U SLUČAJU FABRIČKOG OŠTEĆENJA.**

## ORTOPEDIJA – NOVI ŽIVOT

### PRIGOVOR - REKLAMACIJA

Potrošač ima pravo prigovora - reklamacije na kupljeni proizvod za koji se ne izdaje garantni list, u roku od 6 meseci od datuma kupovine.

Uz prigovor se OBAVEZNO podnosi račun o kupljenom proizvodu.

Prigovor se podnosi u prodajnom objektu u kome je proizvod kupljen tj. licu ovlašćenom za prijem prigovora koje je prisutno na prodajnom mestu tokom radnog vremena.

Ovlašćeno lice odlučuje o prigovoru istog dana kada je prigovor podnet, a najkasnije u roku od osam dana od dana podnošenja prigovora.

Ako je prigovor osnovan zbog nedostatka na proizvodu, potrošač ima pravo na:

1. zamenu kupljenog proizvoda za nov proizvod, odnosno proizvod odgovarajuće marke (modela, tipa)
2. da mu se vrati iznos plaćen za taj proizvod u visini maloprodajne cene tog proizvoda na dan kupovine
3. otklanjanje nedostatka na proizvodu.

Potrošač ima pravo na zamenu kupljenog proizvoda ili povraćaj plaćenog iznosa samo ukoliko proizvod nije korišćen, nije oštećen ni na koji način i u originalnom je pakovanju. Prodavac će detaljno pregledati proizvod i utvrditi ispunjenost svih uslova za prihvatanje prigovora.

Prigovor je neosnovan ako je nedostatak na proizvodu nastao:

1. zbog nepravilnog korišćenja, rukovanja, održavanja ili stavljanja proizvoda u funkciju
2. zbog oštećenja proizvoda koji je posledica nemarnog odnosa prema proizvodu, pokušaja popravki ili prepravki proizvoda, nasilnog otvaranja
3. u uslovima koje Ortopedija – Novi život nije mogla ni na koji način da predvidi, spreči ili da na njih preventivno utiče (viša sila).

Ako potrošač pretrpi štetu prouzrokovanu proizvodom sa nedostatkom, može da zahteva naknadu štete. Prava na naknadu štete potrošač može da ostvari pod uslovom da nedostatak nije nastao njegovom krivicom

Ovlašćeni predstavnik proizvođača, uvoznik i distributer:

Ortopedija – Novi život doo, Ustanička 234A, Beograd

Tel. Maloprodaja: 011/7621-952

Veleprodaja i servis: 011/7621-953

Email: [info@ortopedija.co.rs](mailto:info@ortopedija.co.rs)

[www.ortopedija-novizivot.co.rs](http://www.ortopedija-novizivot.co.rs)

Broj rešenja 515-02-01373-23-003 od 29.05.2023.