

IDENTIFIKACIONI LIST

Finalna inspekcija:

Ime:

Potpis:

Identifikaciona nalepnica:

patron[®]

Uputstvo za upotrebu (SRB)

Uslovi garancije:

1. Na ovaj proizvod se daje garancija od 12 meseci od datuma prodaje. Garancija se primenjuje za materijal i oštećenja u proizvodnji.
2. Proizvod se mora u potpunosti koristiti u svrhu za koju je dizajniran i moraju se poštovati uputstva za upotrebu.
3. Proizvod se mora pravilno upotrebljavati, održavati, čistiti i skladištiti u skladu sa uputstvima za upotrebu.
4. Ne skidajte identifikacijsku oznaku. Mora biti čitljiva i neoštećena tokom celog garantnog perioda.
5. U slučaju popravke u garantnom roku, morate se obratiti prodavcu, gde je proizvod kupljen. Pravilno popunjeni „Garantni list“ i dokaz o kupovini moraju biti navedeni u zahtevu za garanciju. Svaki kvar treba odmah prijaviti.
6. Postupak za podnošenje zahteva za popravku u garantnom roku može se pokrenuti kada se uređaj isporučuje kompletan, u originalnom pakovanju, pažljivo pakuje i obezbedi protiv oštećenja. Vlasnik se obavezuje da uređaj isporuči čistim, u skladu sa opštim higijenskim merama. Osnovno održavanje i čišćenje od strane servisera ne mogu se očekivati niti zahtevati.
7. Garancija ne pokriva: kvarove uzrokovane preopterećenjem kolica, nesreće, oštećenja izazvana nepažnjom, neovlašćene promene proizvoda i / ili njegovih dodataka, prirodno habanje delova, naročito prljavštine i oštećenja presvlake, habanje plastike, delovi, kočnice, gume (ispuštanje vazduha ili potpuno oštećenje) itd.
8. Garancija se ukida kad god se pojave sledeći uslovi: korisnik ne poštuje uputstva navedena u ovom uputstvu za upotrebu i preporučene procedure skladištenja i održavanja proizvođača ili kada proizvod servisa bilo koja druga strana, osim ovlašćenih servisnih centara, ili kada identifikaciona nalepnica nije nalepljena na kolicima, kao ni na garantnom listu.
9. Garantni rok se ne može zameniti sa rokom korišćenja, to znači za ceo životni vek kada se ispune ispravna upotreba i održavanje proizvoda u skladu sa uputstvom za upotrebu.
10. Proizvođač niti uvoznik nisu odgovorni za gubitke i povrede nastale manipulisanjem i korišćenjem proizvoda u suprotnosti sa uputstvima „Uputstva za korisnike“.

Datum prodaje (dan, mesec, godina)

Naziv (vrsta), broj telefona, pečat, potpis prodavca:

Ovlašćeni predstavnik proizvođača, uvoznik i distributer u RS:

Ortopedija - Novi Život doo, Ustanička 234A, Beograd
Tel: maloprodaja 011/7621-952, veleprodaja i servis 011/7621-953
Email: info@ortopedija.co.rs
www.ortopedija-novizivot.co.rs

Broj rešenja 515-02-03354-19-004 od 02.12.2019.

TOM 4 Classic-CSI STD
TOM 4 Classic-CSI MAXI
TOM 4 Classic-CSI SM42




Proizvodnja i distribucija:
PATRON Bohemia a.s.
Českolipská 3419
CZ- 27601 Mělník, Česká Republika
tel.: +420-315 630 111
fax.: +420-315 630 199
Info.cz@patron.eu
[http:// www.patron.eu](http://www.patron.eu)

161206



ŠEMA

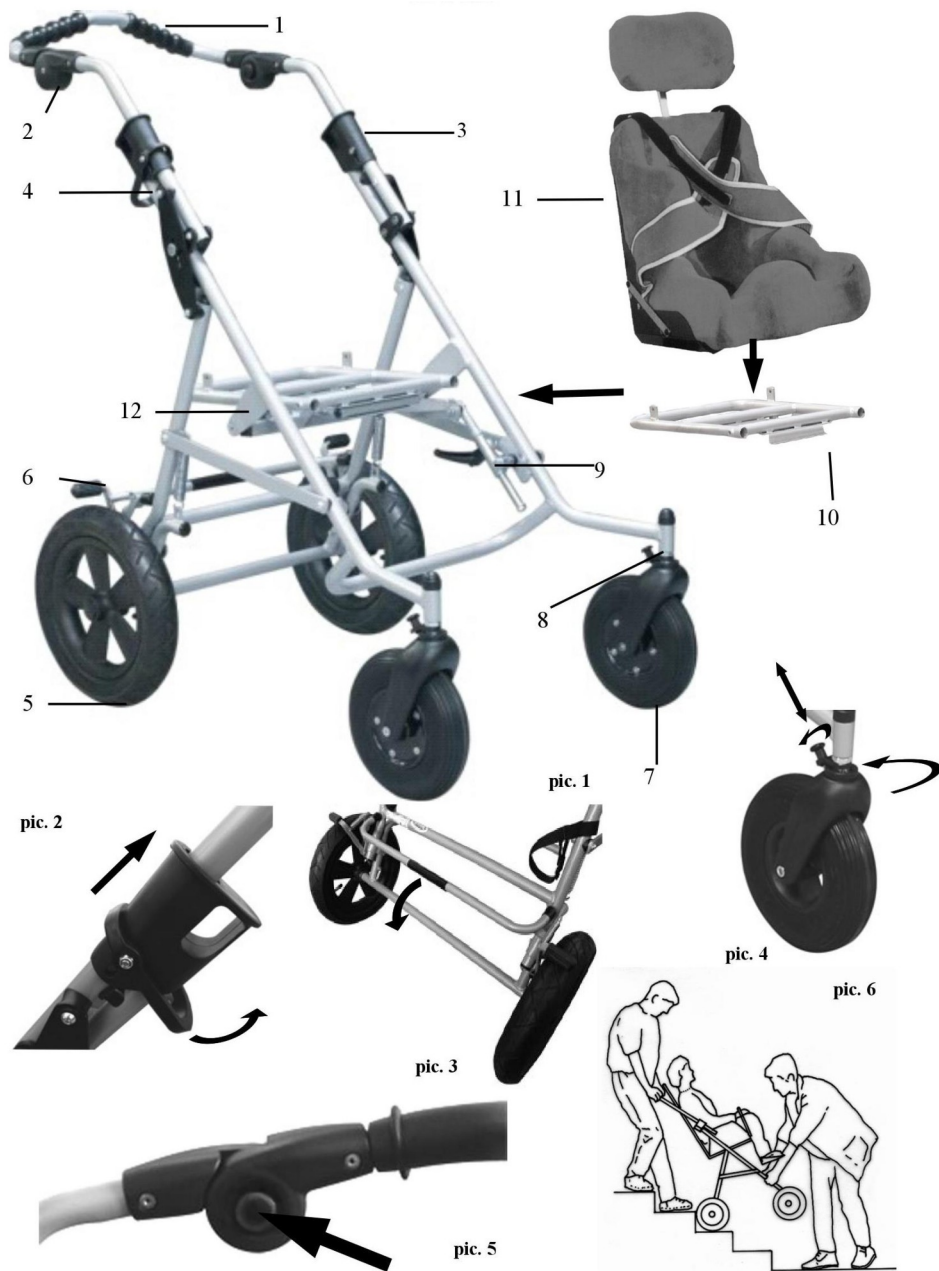

OSNOVNI TEHNIČKI PODACI

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	STD	MAXI	SM42
Unutrašnja širina rama (mm)	370	410	460
Sedište do poda (mm)	490	500	500
Sedište ugao	+/- 27°	+/- 25°	+/- 25°
Ukupna dužina (mm)	860	920	1100
Ukupna širina (mm)	580	630	680
Ukupna visina / sa ručkama (mm)	1010/1150	1030/1180	1030/1180
Kočnice	Nožne	Nožne	Nožne
Težina (kg)	10,0	11,0	12,0
Nosivost (kg)	40,0	55,0	80,0
Sklopljena kolica dužina (mm)	930	960	960
Sklopljena kolica širina (mm)	580	630	680
Sklopljena kolica visina (mm)	430	430	430

5) Opciona oprema:

Ovaj proizvod se može opcionalno isporučiti sa širokim rasponom opreme za fiksiranje i dodacima za pozicioniranje.

Korpa:

Zakačite korpu ram. **Maksimalna nosivost je 3 kg.**

Podstavljanje prekrivača:

Pričvrstite prekrivač preko cevi za rukohvat i preko otpuštajućeg preklopa ručke čičak trakom.

ODRŽAVANJE

Kolica su dizajnirana po visokim standardima i uz pravilnu upotrebu i održavanje pružice vam dugogodišnju upotrebu, bez korišćenja pomoći ovlašćenog servisa.

- Redovno pregledajte zaštitne trake, uređaje za zaključavanje, hvataljke, zglobove i papučice kako biste bili sigurni da su i dalje sigurni i funkcionalni. Kočnice, točkovi i presvlake su delovi koji se lako troše i zato ih je potrebno menjati uvek kada je to neophodno.
- Preporučuje se da ovaj uređaj i ram pregleda ovlašćeni servis na svakih 12 meseci.
- Preporučujemo da posle 24 meseca posetite ovlašćeni servis.
- U slučaju oštećenja ili potrebe popravke, za ove usluge su dozvoljeni samo odobreni ovlašćeni servis.
- Samo rezervni delovi koje isporučuje kompanija PATRON Bohemia a.s. mogu se koristiti za popravke.
- Na pokretne delove redovno nanosite maziva za prskanje (npr. VD40), minimalno svakih šest meseci, nikada ne koristite ulje ili vazelin.
- Pazite da ne koristite preveliku količinu maziva (može prouzrokovati nanošenje nečistoće na pokretne delove). Obrišite višak maziva.
- Uverite se da ste pravilno upoznati sa uputstvima koja su navedena u ovom uputstvu za upotrebu.
- Manipulacija sedištem kada ga podešavate mora biti uvek jednostavna i lagana. Ako nije tako, pročitajte ponovo odgovarajući deo uputstva za korisnike.
- Ram, plastika i točkovi mogu se oprati toplom vodom uz dodatak uobičajenog deterdženta.
- Redovno proveravajte pritisak vazduha u gumama
- Tapacirung je moguće očistiti krpom namočenom u toploj vodi, eventualno oprati u veš mašini na maksimalnoj temperaturi od 40 ° C na programu za osetljiv veš.
- Nikada ne čistite abrazivom, amonijakom, izbeljivačem ili sredstvima na bazi alkohola.
- Nakon izlaganja vlažnim uslovima, osušite kolica mekom krpom i ostavite ih rasklopljena u u toploj prostoriji.
- Čuvajte kolica na suvom i sigurnom mestu sa preporučenom temperaturom 5-20 ° C.
- Redovno proveravajte i zategnite šrafove.
- Preporučujemo da posle 24 meseca posetite servis.
- Ako se koriste kontrolni kablovi (kočnice, teleskopi, nagib), redovno ih proverite i po potrebi podesite i podmažite.
- PATRON Bohemia a.s. zadržava pravo promene na svim proizvodima.

OPIS ŠEME

1. Rukohvat
2. Ručka za podešavanje visine rukohvata
3. Oslobađanje rukovata za sklapanje
4. Bezbednosna sklopka za rukohvat
5. Zadnji točak
6. Parking kočnica
7. Prednji točak
8. Okretna brava
9. Podešavanje ugla naslona leđa
10. CSI položaj sa sistemom za brzo otpuštanje
11. Školjka sedišta (nije uključena)
12. Zaključavanje položaja sedišta

Poštovani korisnici,

TOM 4 Classic CSI je specijalni ram dizajniran kao osnova za pričvršćivanje posebno prilagođenih sedišta ili sedišta radjena posebno za potrebe korisnika. Specijalni ram zasnovan je na novom unapređenom dizajnu sa spuštenim težištem, opremljen posebnim CSI priključkom i brzim otpuštanjem dela za zaključavanje za jednostavno pričvršćivanje prilagođenih sedišta.

Sedište se ne isporučuje uz ram.

U slučaju da niste potpuno sigurni u upotrebu proizvoda dok čitate uputstvo za upotrebu, obratite se zvaničnom distributeru za savet.



..... **BEZBEDNOST I UPOZORENJE:**



OPREZ! Svako opterećenje pričvršćeno na rukohvat (torba,...) utiče na stabilnost rama!



Preporučeni pritisak vazduha u gumama: 230/230 kPa



..... **.Maksimalno opterećenje.**



..... **Težina proizvoda**

UPOZORENJE! Ne držite prste u blizini bilo kakvih pokretnih delova kada radite sa ramom.
UPOZORENJE! Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora! Čak i ako se koriste pojasevi i kočnice.
UPOZORENJE! Pre upotrebe proverite da li su svi uređaji za zaključavanje pravilno zaključani i da li se svi bezbedni uređaji pravilno koriste.
UPOZORENJE! Ovaj proizvod se ne sme koristiti za trčanje ili rolere.
PAŽNJA! Pažljivo pročitajte ovaj priručnik pre prve upotrebe rama i sačuvajte ga za dalju upotrebu.
Bezbednost deteta može biti u opasnosti u slučaju da ne sledite uputstva i bezbednosne napomene navedene u korisničkom uputstvu.

Onaj koji upravlja kolicima mora biti upoznat sa uputstvima ovog priručnika.

Pre upotrebe potrebno je potražiti stručni medicinski savet u pogledu pogodnosti ovog proizvoda.

Uverite se da je dete obezbedjeno od delova pre podešavanja, kako ne bi došlo do povreda.

Prilikom ulaska i izlaska iz kolica uvek aktivirajte ručne kočnice.

Ne stojte na papučici za noge.

Prilikom ulaska i izlaska iz kolica uvek aktivirajte ručne kočnice.

Prelazite preko ivičnjaka prvo sa praznim kolicima.

Onaj koji koristi kolica mora da preduzme mere zaštite od požara. U zgradama proverite lokaciju izlaza za vatru i proverite da li su postupci razumljivi.

Ne dozvolite deci da se igraju ili vise na kolicima.

Tokom vožnje budite usredsređeni kako biste izbegli bilo kakve opasne situacije ili sudare.

Prilikom manipulacije ramom obratite pažnju na to da ne povredite dete ili sebe.

Ako je moguće, uvek koristite rampe za podizanje ili liftove da biste savladali ograničenja pristupa.

Uvek dižite ram sa još jednom osobom.

Kolica nisu dizajnirana da se voze niz stepenice.

Nikada ne prevozite ram ako vi i / ili pomoćnik niste sigurni da li možete bezbedno prevoziti kolica sa detetom.

Kad vozite na putu, pridržavajte se saobraćajnih propisa.

Ne koristite ram za bilo koje druge svrhe, osim za one za koje je namenjen.

Ram je dizajniran za prevoz samo jednog deteta.

Ne koristite dodatnu opremu drugog proizvođača osim PATRON opreme namenjene ovom proizvodu.

Kada se kolica sklapaju i rasklapaju, pažljivo se pridržavajte uputstva za korisnike kako ne bi došlo do oštećenja na konstrukciji koja mogu uticati na stabilnost kolica.

U slučaju očiglednih oštećenja, koja ograničavaju sigurnu upotrebu proizvoda (npr. oštećenje šasije, delovi koji nedostaju ili druga vidljiva oštećenja, pukotine itd.), potrebno je odmah prestati koristiti kolica i obratiti se zvaničnom distributeru ili ovlašćenom servisu.

Kompanija PATRON ne snosi nikakvu odgovornost za štetu nastalu upotrebom podataka koji nisu proizvedeni od strane PATRON kompanije.

Kompanija PATRON ne snosi nikakvu odgovornost za štetu i nezgode nastale neadekvatnom upotrebom ovog proizvoda.

1) Ram:

Otvaranje rama:

Postavite sklopljena kolica na točkove. Otkopčajte i osloдите transportni sigurnosnu kopču na ramu. Da biste otvorili postojte rama između zadnjih točkova i čvrsto držite rukohvat. Pomerite ručicu prema gore i nazad sve dok se kopča rukohvata u potpunosti ne zaključa u krajnjem položaju. Da biste proverili položaj zaključavanja, pomerite rukohvat prema gore kako biste bili sigurni da su oba mehanizma u potpunosti zaključana (ram ne sme da se savija). Po izboru, ram može biti opremljen mekanim jastučićima oko samog rama (opciona oprema). Ram je sastavljen.

Sklapanje rama:

Podignite rukohvat koja se preklapa, otpustite pokretne delove (slika 2) sa obe strane i preklonite rukohvat prema prednjim točkovima. Osigurajte presavijeni ram sigurnosnim hvatajkom. Ram je sklopljen.

2) CSI položaj (položaj sedišta na ramu):

Skidanje školjke sedišta (nije isporučeno uz proizvod):

Ukočite ram, otpustite obe brave sedišta (12) i povucite obe ručice da biste otključali položaj. Možete skinuti školjku sedišta. Školjka sedišta mora biti bez deteta i prazna.

Postavljanje sedišta (nije isporučeno uz proizvod):

Postavite sedišta tačno u delove za instalaciju sedišta na ramu. Pritiskom prema dole okrenite ručicu desne brave sedišta dok se ne zaključa u ispravnom položaju, ponovite sa levom ručicom za zaključavanje sedišta. Na kraju proverite da li je sedišta zaključano tako što ćete lagano podići sedišta. Sedišta ne sme da se odvaja od rama.

UPOZORENJE: Kućište sedišta se može postavljati u smeru vožnje.

Ručna kočnica:

Da biste ukočili točve, pritisnite polugu kočnice (slika 3). Da biste otkočili, povucite polugu.

Brava za zaključavanje točkova koji se okreću:

Ako je potrebno, viljuške prednjeg točka mogu se zaključati u položaju vertikalnog okretanja. Da biste zaključali viljuške točkovića, podignite kolica i okrenite zavrtanj za 90° na obe strane (slika 8) i pustite ga da upadne u predviđeni otvor na viljušci (slika 4).

Podešavanje visine rukohvata:

Da biste promenili položaj visine rukohvata istovremeno pritisnite crne plastične tastere na šarkama sa obe strane (2), podesite rukohvat u željeni položaj, otpustite tastere. Rukohvat će se automatski zaključati u novom položaju, čujete zvuk zaključavanja. (Slika 5)

3) Rukovanje kolicima:

Prelazak ivičnjaka, niskih prepreka ili jednog stepenika:

Silazak na dole - stavite prednje točkove do ivice pločnika, čvrsto držite ručke i kolica nagnite unazad da težište bude na zadnjim točkovima, dodajte zadnjim točkovima do ivice pločnika i lagano spustite kolica preko ivice zadnjim točkovima. Nikada ne podižite zadnji deo kolica prema ivici. Nikada ne okrećite kolica prema stepenicama.

Penjanje na gore - stavite prednje točkove do ivice pločnika. Čvrsto držite ručke, nagnite kolica unazad i prednje točkove postavite na ivičnjak. Malo gurnuti kolica tako da zadnji točkovi dodju do ivice i podignite kolica na nivo pločnika. NIKADA ne udarajte prednjim točkovima u ivičnjak!

Prenošenje kolica preko stepenica

- koristiti rampe, platforme ili liftove, kada su dostupni

- gde je moguće izbegavati stepenike, ako ne postoje druge mogućnosti, neka vam bar jedna osoba pomogne

- ne pokušavajte da dižete kolica ili spuštate uz / niz stepenište, osim ako vi i vaš pomoćnik niste sigurni da imate kontrolu nad kolicima i možete da podignete težinu deteta i kolica.

- tokom ove operacije, pratilci i pomagači moraju biti dobro uskladjeni i čvrsto držati kolica

- kolica morate držati svo vreme

- odmarajte se u redovnim intervalima

- NIKADA ne podižite kolica držeći papučice za noge

Spuštanje niz stepence - kolica uspravno postavite s prednjim točkovima na prvi stepenik (ili podest), nagnite ih prema nazad i gurajte kolica prema napred dok zadnji točkovi ne budu na vrhu stepeništa; pomagač stoji ispred, drži čvrsto kolica za prednji okvir (ram); spustite zadnje točkove niz prvi stepenik i korak po korak nastavljajte prema dnu (slika br. 6).

Penjanje uz stepenice - kolica postavite prednjim točkovima uz prvi stepenik, nagnite ih i postavite ih na prvi stepenik; pomagač stoji iznad kolica, drži ih čvrsto i podiže ih hvatajući prednji okvir (ram); nastavite korak po korak do vrha (slika br. 6).

4) Standardna oprema:

Bezbednosna hvataljka za transport:

Učvršćivanje - prevucite sigurnosnu hvataljku za transport oko vertikalne cevi i prednjeg rama. Prekrivač pričvrstite kroz petlju i fiksirajte ga.

Rastavljanje - otkopčajte i otpustite zatvarač.

GARANCIJA

POŠTOVANI POTROŠAČI!
Ovaj proizvod servisirao ORTOPEDIJA NOVI – ŽIVOT, Ustanička 234A, Beograd, tel/fax: 011/7621-952,
(953,954,956)

Zahvaljujemo Vam na kupovini naših proizvoda.

Garancijska izjava

Garantne obaveze privrednog društva ORTOPEDIJE – NOVI ŽIVOT d.o.o. iz Beograda (u daljem tekstu ONŽ) ograničene su samo na obaveze navedene u ovom dokumentu. Ne prihvataju se nikakve dodatne obaveze koje nisu pomenute u garantnom listu.

ONŽ garantuje da će proizvod u garantnom roku pravilno funkcionisati ako njime budete rukovali prema priloženom uputstvu i u granicama izdržljivosti koje propisuje proizvođač. Garancija i garantni rok počinje datumom preuzimanja proizvoda, što ćete dokazati overenim garantnim listom.

Garantovana prava potrošača: ONŽ garantuje kvalitet proizvoda u garantnom periodu i pod uslovima u ovom garantnom listu. Ukoliko se u garantnom roku pokaže oštećenje proizvoda zbog nekvalitetnih materijala ili izrade, ONŽ će:

obezbediti popravku proizvoda bez nadoknade za rad i delove, korišćenjem novih delova, i u predviđenom roku (1),

zameniti proizvod novim i/ili funkcionalno ekvivalentnim (2).

ONŽ zadržava isključivo pravo da odabere način ispunjenja svojih garantnih obaveza iz ovog garantnog lista.

Ukoliko nedostaci na proizvodima, u skladu sa garantnim uslovima, nisu otklonjeni u roku od 45 dana od dana prijema uređaja na servis, ONŽ se obavezuje da u interesu kupca razreši reklamaciju na način pod brojem (2).

Rezervni delovi:

ONŽ se obavezuje da će obezbediti rezervne delove ili funkcionalne ekvivalente proizvoda u periodu od 12 meseci od datuma isporuke/preuzimanja proizvoda.

ONŽ nije u obavezi da obezbedi rezervne delove u slučaju da:

- ❖ proizvođač nije predvideo popravku proizvoda pa stoga ne nudi rezervne delove ili je cena novog proizvoda niža od troška popravke,
- ❖ se usled primene novih tehnologija ili iz bilo kojeg drugog razloga pojedini elementi prestanu proizvoditi,
- ❖ je proizvođač bankrotirao ili iz bilo kojeg drugog razloga nije više prisutan u ponudi na našem ili svetskom tržištu.

Garantni rok:

Garantni rok za proizvod je 12 meseci uz poštovanje uputstva za upotrebu i drugih garancijskih uslova.

OSTVARENJE GARANCIJE

Uputstva i uslovi garancije: Da bi se izbegle neprijatnosti i dodatni troškovi, predlažemo Vam da pažljivo pročitate garantni list i uputstvo za upotrebu proizvoda. Trenutkom kupovine proizvoda u potpunosti prihvatate garantne uslove navedene u ovom garantnom listu.

Pregled/inspekcija proizvoda i pratećih elemenata: Potrošač je dužan da pregleda kupljene proizvode u trenutku preuzimanja. Ukoliko neki deo proizvoda nedostaje, nije kompletan ili je fizički

oštećen, potrošač mora o tome trenutno obavestiti ONŽ. Naknadni zahtevi po ovom osnovu se neće razmatrati.

Overen garantni list: Potrošač je dužan da vodi računa o ispravnom popunjavanju i overi garantnog lista, bez kojeg garancija ne važi. Garancija se ostvaruje samo na osnovu priloženog fiskalnog računa i originalnog garantnog lista, čitko i pravilno popunjenog i overenog od strane ovlašćenog prodavca. Prepravke na garantnom listu su dozvoljene samo uz overu pečatom i uz potpis ovlašćenog prodavca.

Ovlašćeni servis: Garancija se može ostvariti samo u servisu ONŽ.

Transport proizvoda u servis: Da bi ostvario svoja navedena prava potrošač tj. kupac proizvoda koji reklamira, treba da donese isti u prodavnicu gde je proizvod kupio i da pokaže fiskalni račun i garantni list.

Troškovi transporta: Troškove transporta neispravnog proizvoda do ovlašćenog servisa snosi potrošač. Plaćanje osiguranja odnosno rizik oštećenja ili nestanka proizvoda tokom transporta kao i od servisa su takođe na teret potrošača. Potrošač je u obavezi da pokrije troškove transporta i osiguranja proizašle iz povraćaja ispravnog proizvoda kupcu. Ovi troškovi se kupcu dokazuju računima.

Transportna ambalaža: Kupac je dužan da proizvod, prilikom reklamiranja, zajedno sa pratećom dokumentacijom, dopremi u ovlašćeni servis adekvatno upakovan, kako bi se maksimalno zaštitio od oštećenja prilikom transporta. ONŽ ne snosi nikakvu odgovornost za oštećenja koja su nastala prilikom transporta, a posledica su neadekvatnog pakovanja od strane kupca koji proizvod reklamira.

GARANTNI USLOVI

Neprenosivost bez saglasnosti: Garancija predstavlja sastavni deo kupoprodajnog ugovora i kao takva se ne može prenostiti na drugo lice bez pravilno overene i potpisane saglasnosti oba ugovarača.

Ispravnost uređaja: Garancija se odnosi isključivo na proizvođačku ispravnost uređaja, a ne na očekivane performanse i funkcionalnost od strane korisnika. ONŽ ne snosi nikakvu odgovornost za uticaj medija na kupca u vezi sa očekivanim funkcionalnim osobinama elemenata, koje nemaju realne veze sa proizvođački predviđenim performansama.

Terenske usluge i održavanje: Servisne usluge na terenu i/ili preventivno održavanje proizvoda nisu uračunati u cenu proizvoda pa se naplaćuju prema cenovniku servisnih usluga ili prema ugovorima o servisiranju koje kupac može posebno zaključiti.

Preuzimanje proizvoda iz servisa: Kupac je u obavezi da sam obezbedi preuzimanje popravljene proizvoda. Ukoliko ovlašćeni servis iz bilo kog razloga nije u mogućnosti da o obavljenoj popravci obavesti kupca, ili kupac iz bilo kog razloga izbegava preuzimanje uređaja, ovlašćeni servis je u obavezi da proizvod čuva maksimalno 60 dana od dana prijema na servis. Ovlašćeni servis će u pismenom obliku obavestiti kupca o isteku roka, a nakon tog perioda ONŽ ne snosi nikakvu odgovornost za robu u vlasništvu kupca.

Predmet garancije: Garantni uslovi važe za sve proizvode, osim za sledeće: proizvodi ili delovi proizvoda koji se troše i time se smatraju potrošnim materijalom.

Garantni uslovi važe za usluge servisnih intervencija na proizvodu predviđene ovim garantnim listom, osim u sledećim slučajevima kada se naplaćuju po važećem servisnom cenovniku: preventivno tekuće održavanje opreme, na primer čišćenje ili podmazivanje uređaja, utrošeno servisno vreme na pregled, dijagnozu ili rešenje neispravnosti čiji uzrok nije predviđen ovim garantnim listom. U ovakve intervencije spadaju i bilo koji drugi razlozi

koji ne potpadaju pod garantne uslove. Ovakve usluge se obavezno naplaćuju.

ISKLUČENJE IZ GARANCIJE

Prava kupca koja proizilaze iz ove garancije su nevažeća i ne mogu se ostvariti u sledećim slučajevima tj. garancija se ne priznaje:

- ❖ posle isteka garantnog roka bez obzira kada je proizvod počeo da se koristi,
- ❖ ako je proizvod kupljen u drugoj firmi – garanciju priznaje firma u kojoj je proizvod kupljen,
- ❖ ukoliko je uklonjen ili oštećen zaštitni pečat ili zaštitna nalepnica na proizvodu ili bilo kom njegovom delu,
- ❖ ukoliko postoji neslaganje podataka na garantnom listu i reklamiranom proizvodu, ili ukoliko je ustanovljen pokušaj falsifikovanja garantnog lista ili podataka u njemu,

- ❖ ako je serijski broj i oznaka modela, proizvoda ili nekog njegovog dela, zamenjen, prepravljen, uklonjen ili nečitak,
- ❖ ukoliko se kupac nije pridržavao proizvođačkog uputstva i preporuka o montaži, upotrebi i održavanju proizvoda ili ukoliko je nestručno i nebrižljivo postupao sa reklamiranim proizvodom,
- ❖ ukoliko su na proizvodu vršene intervencije, dogradnje ili održavanje od strane neovlašćenog lica ili servisa, bez obzira na njegovu stručnost i bez obzira da li su ovakve intervencije po mišljenju korisnika uticale na neispravnost proizvoda,
- ❖ ako su oštećenja nastala usled ugradnje neodgovarajućih delova ili upotrebe neodgovarajućeg potrošnog materijala,
- ❖ ukoliko je proizvod korišćen mimo fabrički predviđenog režima eksploatacije ili za bilo koje druge namene van standardno očekivanih i prihvatljivih. U ovaj izuzetak spada i nepredviđeno korišćenje proizvoda u zahtevne profesionalne ili poluprofesionalne svrhe, a da te svrhe nisu proizvođački eksplicitno navedene kao dozvoljene,
- ❖ ukoliko su nepravilnosti u radu reklamiranog proizvoda prouzrokovane neadekvatno niskom ili visokom temperaturom, prekomernim izlaganjem suncu, uticajem vatre, povišenom vlagom, uticajem vode ili bilo koje druge tečnosti, prekomernim taloženjem prašine ili druge nečistoće, usled udara vetra ili nekom višom silom kao što su udar groma sa pratećim pojavama, poplave, požari, zemljotres ili nekim uzrokom izvan kontrole ONŽ-a.

GARANTNI LIST I SERVISNI LIST ZA KRAJNJEG KORISNIKA

POŠTOVANI POTROŠAČI!
 Ovaj proizvod servisira ORTOPEDIJA NOVI – ŽIVOT, Ustanička 234A, Beograd, tel/fax: 011/7621-952, (953,954,956)

<i>Kupac</i>	
<i>Adresa</i>	
<i>Telefon</i>	
<i>Proizvod, model</i>	
<i>Serijski broj</i>	
<i>Datum kupovine/iskoruke</i>	
<i>Napomena</i>	
<i>Potpis i pečat</i>	

servisni kupon 1	
Datum	
Opis posla	
Napomena	
Potpis i pečat	
servisni kupon 2	
Datum	
Opis posla	
Napomena	
Potpis i pečat	