

Ovlašćeni predstavnik proizvođača, uvoznik i distributer:
Ortopedija – Novi život doo, Ustanička 234A, Beograd
Tel. Maloprodaja: 011/7621-952
Veleprodaja i servis: 011/7621-953
Email: info@ortopedija.co.rs
www.ortopedija-novizivot.co.rs
Broj rešenja 515-02-00541-23-003 od 07.03.2023.



REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH
DE-49610 Quakenbrück, Artlandstr. 57- 59
Telephone: +49 (0) 5431/9416-0
Fax: +49 (0) 5431/9416- 66
Web: www.rebotec.de
Email: info@rebotec.de



BA-Nr.: 02.03.006/2021-09-A01

Uputstvo za upotrebu

Štapovi za hodanje

1. Opis proizvoda

1.1. Uvod

- Ovde opisani proizvod je medicinski proizvod klase rizika I prema (EU) 2017/745 MDR.
- U ovom korisničkom priručniku ćete pronaći informacije o bezbednom i pravilnom početnom radu, upotrebi, održavanju i nezi ovog proizvoda. Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu pre upotrebe pomagala. Pratite bezbednosna uputstva i postupajte u skladu sa tim.

2. Karakteristike

2.1. Predviđena svrha

- Proizvod se koristi za podršku i olakšanje u slučaju ograničenja funkcije donjih ekstremiteta. Omogućava korisniku da ostvari svoju želju za mobilnošću. Mora postojati dovoljno jaka muskulatura gornjeg dela tela za bezbednu upotrebu. Osobe sa senzornim oštećenjima možda neće moći da koriste ovo pomagalo. Članak ne nameće nikakve posebne zahteve za edukovanje korisnika.

Specifikacije:

REF	Oznaka					
133...	Simplex	3	125 kg	c	a	
136...	Handy, levi	3	125 kg	c	a	
138...	Handy, desni	3	125 kg	c	a	
142...	Anatom, levi	3	125 kg	c	a	
144...	Anatom, desni	3	125 kg	c	a	
146...	Štap sa Fišerovom drškom, levi	3	125 kg	c	a	
147...	Štap sa Fišerovom drškom, levi	-	125 kg	c	b	
148...	Štap sa Fišerovom drškom, desni	3	125 kg	c	a	
149...	Štap sa Fišerovom drškom, desni	-	125 kg	c	b	
133.22.15	Simplex 150	3	150 kg	c	a	
133.22.16	Simplex 150, extra dug	3	150 kg	c	a	
133.22.17	Simplex 175	3	175 kg	c	a	
142.22.15	Anatom 150, levi	3	150 kg	c	a	
144.22.15	Anatom 150, desni	3	150 kg	c	a	
142.22.16	Anatom 150, extra dug, levi	3	150 kg	c	a	
144.22.16	Anatom 150, extra dug, desni	3	150 kg	c	a	
142.22.17	Anatom 175, levi	3	175 kg	c	a	
144.22.17	Anatom 175, desni	3	175 kg	c	a	
121.20.10	Hemi, mali, levi	3	100 kg	c	a	
121.20.20	Hemi, mali, desni	3	100 kg	c	a	
121.10.10	Hemi, dugi, levi	3	100 kg	c	a	
121.10.20	Hemi, dugi, desni	3	100 kg	c	a	

a=Podesivo po visini/ b=Neprekidna cev, može se skratiti
c=Unutrašnja i spoljna upotreba
1=Standardni klip/ 2=Pritisak stiskom/ 3=Pritisak klipom
4=Standardni pritisak

2.2. Uslovi upotrebe

- Temperaturni opseg: -10°C do +35°C; mora se izbegavati direktno izlaganje toploti. Relativna vlažnost: 40% do 85%. Izvan ovih uslova, proizvod se sme koristiti samo kratko vreme.
- Proizvod nije pogodan za upotrebu u bazenima ili saunama, jer može doći do promene boje površine i ograničenja mehaničke čvrstoće.

2.3. Skladištenje i transport

- Temperaturni opseg: +5° C do +25° C; mora se izbegavati direktno izlaganje toploti. Čuvati proizvod u suvim prostorijama sa vlažnošću do 65%

2.4. Odlaganje

- Odlaganje i reciklaža korišćenih proizvoda i ambalaže mora se vršiti u skladu sa trenutno važećim propisima. Za dodatne informacije kontaktirajte kompaniju za odlaganje otpada. Moraju se poštovati propisi o zaštiti od infekcija. Obratite pažnju na sve etikete i informacije na materijalu za pakovanje i postupajte u skladu sa tim.

3. Simboli i nalepnice

Simbol	Značenje	Simbol	Značenje
	Pročitajte uputstvo!		Godina proizvodnje
	Broj artikla		Proizvođač
	Jezik		Maksimalna težina korisnika u kg
	Važna informacija		Proizvod je u skladu sa (EU) 2017/745 MDR

4. Garancija

- Za ovaj proizvod važi reklamacija od 6 meseci. Usklađenost sa opštim uslovima (www.rebotec.de/agbs), kao i namenska upotreba, su osnovni preduslov. Primenjuju se zakonske odredbe o garanciji.
- Neovlašćene modifikacije ovog proizvoda će poništiti usaglašenost proizvoda i garanciju.

4.1. Reklamacija

- Molimo kontaktirajte nas pre vraćanja proizvoda. Da biste smanjili oštećenja prilikom transporta, koristite originalno pakovanje.
- Moraju se poštovati propisi o zaštiti od infekcije.
 - Uverite se da proizvod ne predstavlja opasnost od infekcije kada se vrati. Uz proizvod priložite informativni list o bezbednosti.

5. Bezbednosne instrukcije



Molimo pridržavajte se sledećih bezbednosnih instrukcija :

- Pre prve upotrebe proizvoda, uputstvo za upotrebu se mora u potpunosti pročitati kako bi se izbegla oštećenja uzrokovana greškom u korišćenju ili povredama. Pre svake upotrebe proverite proizvod za vidljiva oštećenja ili nedostatke. U slučaju kvara ili oštećenja bilo koje vrste, proizvod se ne sme koristiti. Redovno proveravajte da li guma ima oštećenja i istrošenost; zameniti ako je potrebno.
- Štap mora biti postavljen na pod što je više moguće vertikalno kada hodate. Zato nikada ne postavljajte štap predaleko od tela ili napred u pravcu hoda. Jednom rukom uhvatite ručicu potpuno i čvrsto. Ako je moguće, neka vas pomoćnik prati i podržava kako bi vas uhvatio ako padnete.
- Štap se ne sme koristiti u druge svrhe. Stoga ga koristite samo da biste podržali svoju sposobnost hodanja, a ne, na primer, kao pomoćno sredstvo za uspravljanje, kao polugu, za pomeranje nameštaja ili drugih predmeta. Ne pričvršćujte nikakve predmete (torbu, torbicu, itd.) na štap.
- Nakon dužeg perioda nekorišćenja: Neka štap proveri kvalifikovano osoblje ili specijalizovani prodavac. Ne vršite nikakve neovlašćene mehaničke modifikacije (odgovornost za proizvod!).



Pročitajte ovo uputstvo za upotrebu pre prve upotrebe uređaja i držite ga pri ruci za korisnika, kao i za buduću upotrebu i kasniju prodaju.



Nemojte izlagati štap sunčevoj svetlosti tokom dužeg vremenskog perioda (na prozoru, kod grejača, u automobilu). Toplota može dovesti do promena u svojstvima materijala i trajnosti

- **Pažnja, opasnost od klizanja:** Nikada ne hodajte sa štapom po snegu ili ledom pokrivenom tlu bez uređaja protiv klizanja (nastavak za led). Budite oprezni kada hodate po vlažnim pločicama, podovima ili prelazite preko tepiha. Nikada ne čistite ručke ili gume supstancama koje sadrže ulje. Budite oprezni sa neravninama, rupama u zemlji i rastresitom zemljom, jer štapići za hodanje mogu neočekivano da iskliznu ili utonu.
- Postoji opasnost od povreda sa temperaturom površine > 40°C. Ne izlažite proizvod visokim temperaturama (npr. sunčeva svetlost, radijatori, topla voda). Ostavite proizvod da se ohladi pre upotrebe.



Ako proizvod koriste pacijenti sa neosetljivom kožom (bez percepcije temperature ili sa oštećenjem kože), medicinsko osoblje mora da izvrši toplotnu proveru (npr. dodirivanje gornjom stranom šake).

6. Prijavlivanje incidenata

- Ozbiljni incidenti u vezi sa proizvodom moraju se odmah prijaviti proizvođaču (pms@rebotec.de) i BfArM-u (www.bfarm.de/DE). Koristite BfArM-ove izveštaje i obezbeđene obrasce.

7. Ponovna upotreba, životni vek

- Proizvod je pogodan za ponovnu upotrebu. Koliko često se proizvod može ponovo koristiti zavisi od učestalosti i prirode upotrebe. Pre ponovne upotrebe, proizvod mora biti higijenski obrađen, a tehnička i funkcionalna bezbednost i pouzdanost proizvoda moraju biti provereni i po potrebi obnovljeni. Za detaljnije informacije pogledajte uputstva za ponovnu upotrebu (01.12.154). Dokumente možete preuzeti sa sledećeg linka www.rebotec.de/downloads.
- Kada se koristi u skladu sa namenom, proizvod ima vek trajanja od 2 godine. Efektivni vek trajanja može da varira u zavisnosti od učestalosti i intenziteta upotrebe i opšteg stanja.

8. Podešavanje za upotrebu

- Proizvod je pažljivo pregledan u fabrici da nema nedostataka i da li je potpun. Molimo Vas da po prijemu proverite da li proizvod ima eventualnih oštećenja u transportu i da li je kompletan obim isporuke.

8.1. Prilagođavanje visini tela

- Neka proizvod podesi kompetentno kvalifikovano osoblje prema visini vašeg tela.
 - Visina se podešava pomoću teleskopske aluminijumske cevi sa klipom (2). Pre podešavanja, navojni spoj se mora olabaviti okretanjem ulevo. Nakon podešavanja, navojni spoj se mora ponovo zategnuti




- Proizvodi sa kontinualnom cevi moraju biti isečeni

Podaci o proizvodu

- Zadržavamo pravo na tehnički razvoj i poboljšanja u pogledu dizajna prikazanog u ovom korisničkom priručniku.

REF	b / mm	a / mm
133...	730- 955	17
136...	710- 935	17
138...	710- 935	17
142...	720- 945	17
144...	720- 945	17
146...	700- 925	17
147...	up to 1055	22
148...	700- 925	17
149...	up to 1055	22
133.22.15	745- 970	19
133.22.16	845- 1070	19
133.22.17	745- 970	19
142.22.15	740- 965	19
144.22.15	740- 965	19
142.22.16	840- 1065	19
144.22.16	840- 1065	19
142.22.17	740- 965	19
144.22.17	740- 965	19
121.20.10	1210- 1610	19
121.20.20	1210- 1610	19
121.10.10	1460- 1880	19
121.10.20	1460- 1880	19

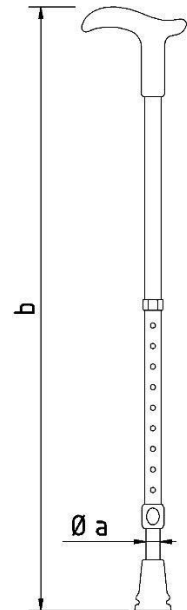

10. Čišćenje i nega

- Proizvod se može čistiti blagim konvencionalnim sredstvom za čišćenje i dezinfekciju. Nakon čišćenja, obrišite proizvod čistom, vlažnom krpom, a zatim ga osušite suvom krpom. Nemojte koristiti sredstva za ribanje ili sredstva za čišćenje sa agresivnim aditivima (obratite pažnju na informacije o proizvodu!), kao ni tvrde predmete za čišćenje, jer u suprotnom može doći do oštećenja površina ili stvaranja naslaga

11. Održavanje

- Neka pomagalo za hodanje proverava vaš specijalizovani prodavac najmanje 1x svakih šest meseci. Istrošene gume (deo koji se haba) moraju se odmah zameniti. Obratite pažnju na prečnik (vidi 9). Povucite gume sa kraja cevi. Gurnite novu gumu do kraja i proverite da li je čvrsto postavljena.

Rezervni delovi i dodaci:

Br. Art.	Designation
200...10	Gumena stopa 17 mm
200...00	Gumena stopa 19 mm
200...20	Gumena stopa 22 mm
201...00	Osigurač za podešavanja 22 mm
201...20	Osigurač za podešavanja 20 mm
02.03.006	Uputstvo za upotrebu
02.12.154	Uputstvo za ponovnu upotrebu